

ClassicStar® NIV-Gesichtsmaske Verbrauchsmaterial und Zubehör


Die ClassicStar® NIV-Gesichtsmaske wurde für die nicht-invasive Beatmungstherapie entworfen. Die Maske deckt den Mund und Nase ab und bietet somit eine effektive Therapie auch im Falle von Mundatmung. Die ClassicStar ist mit Standard-Winkelstück (SE-Version) sowie Anti-Asphyxie-Ventil (AAV-Version) erhältlich. Dieses Portfolio bietet mehr Tragekomfort durch anatomische Passform sowie effektive Abdichtung.

ClassicStar® SE (mit Standard-Winkelstück)

Das blaue Winkelstück zeigt an, dass die Maske weder ein Anti-Asphyxie-Ventil noch Ausatemöffnungen hat.

ClassicStar® AAV (mit Anti-Asphyxie-Ventil)

Das weiße transparente Winkelstück ist mit einem Anti-Asphyxie-Ventil ausgestattet, das bei reduziertem Druck ($< 3 \text{ cm H}_2\text{O}$) einfachen Zugang zur Raumluft sicherstellt. Die Ausatemöffnungen unterstützen die CO_2 Eliminierung während der nicht-invasiven Beatmung.

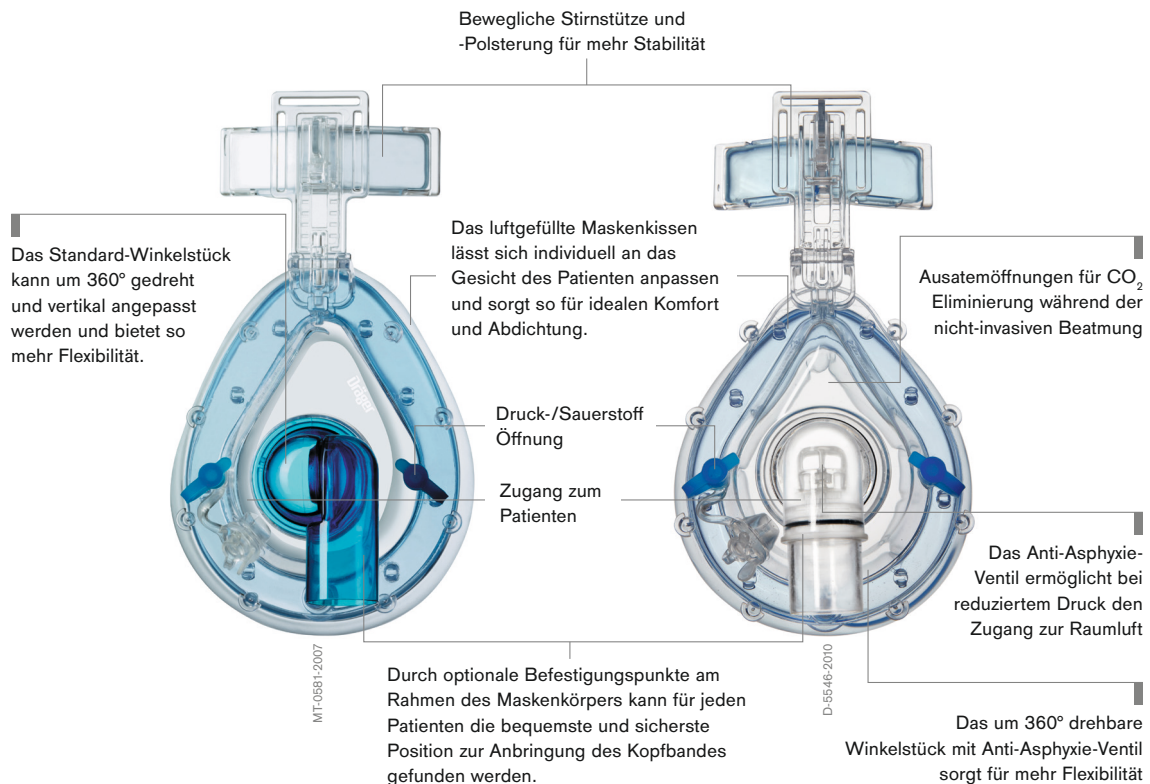

Produktvorteile

ClassicStar NIV-Gesichtsmaske

Die ClassicStar NIV-Gesichtsmaske ist eine Einwegmaske.

Die Dräger Größenschablone hilft bei der Auswahl der richtigen Maskengröße – unnötiges Öffnen von Maskenverpackung wird vermieden.

- Die ClassicStar NIV-Gesichtsmaske hat ein luftgefülltes Maskenkissen, das sich individuell an die Gesichtskonturen des Patienten anpassen lässt. Das Maskenkissen kann z. B. mit Hilfe des Pumpballs mit Luft befüllt oder entleert werden. Durch diese Anpassung bietet die Maske einen erhöhten Komfort und effektive Abdichtung.
- Das breite Maskenkissen der ClassicStar NIV-Gesichtsmaske verteilt den Druck über eine größere Oberfläche und hilft dadurch Hautirritationen zu vermeiden.
- Die Stirnstütze mindert den Druck auf den Nasenrücken und kann an die Stirn des Patienten angepasst werden.
- Das 6-Punkt Kopfband bietet eine stabile und sichere Befestigung, die ein Verrutschen der Maske verhindert. Für ein schnelles Entfernen der Maske ist im Kopfband ein Notgurt integriert.
- Optionale Befestigungspunkte am Rahmen des Maskenkörpers ermöglichen die für den Patienten bequemste und sicherste Anbringung des Kopfbandes.
- Das Winkelstück der ClassicStar NIV-Gesichtsmaske kann um 360° gedreht und zusätzlich vertikal bewegt werden (nur SE-Version) und bietet so mehr Flexibilität.

Bestellinformationen

ClassicStar SE	Verpackungseinheit	Bestellnummer
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe S	1 Stück	MP01573
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe M	1 Stück	MP01574
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe L	1 Stück	MP01575
ClassicStar AAV		
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe S	1 Stück	MP01570
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe M	1 Stück	MP01571
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe L	1 Stück	MP01572
Zweiseitiger Pumpball zur Luftregulierung	1 Stück	MP01590
Größenschablone für ClassicStar Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung	3 Stück	MP01592

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebfeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

